


HOMEDICS

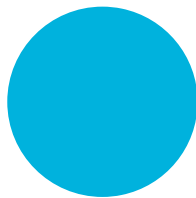

mē

Système d'épilation professionnel elös™

Notice d'utilisation

Sommaire

Présentation	1
Qu'est-ce que la technologie de synergie électro-optique (elōs) ?	2
Contenu de l'emballage	3
Importantes informations de sécurité	6
Effets secondaires et réactions allergiques possibles	9
Quel est l'usage spécifique de mē ?	10
Mode d'emploi de votre système mē	11
Nettoyage et rangement	14
Remplacement de la cartouche/du rasoir/de l'épilateur/ de l'adaptateur spécial visage	15
Utilisation de votre système mē en déplacement	17
Dépannage	18
Garantie et service après-vente	20
Informations relatives au fabricant	21
Caractéristiques techniques	23


Introduction...

7

Félicitations pour votre achat de l'appareil mē ! mē est un appareil d'épilation novateur qui peut être utilisé dans le confort et l'intimité de votre maison. mē est le seul appareil d'épilation permanente à usage domestique qui utilise la technologie brevetée elōs et offre un traitement sûr et efficace cliniquement prouvé pour tous types de peau. Simple d'emploi, il traite en douceur en quelques minutes. Terminé l'épilation à la cire et au rasoir car désormais vous pouvez profiter d'une peau lisse et soyeuse sans souci.

Prévention efficace contre la repousse des poils

La réduction pileuse est un processus graduel et cumulatif. Nos études cliniques ont montré que la repousse des poils est réduite en utilisant mē. La période nécessaire pour des résultats visibles et la durée des résultats varient d'une personne à l'autre. Des traitements périodiques sont recommandés pour maintenir ces résultats. Des études cliniques ont montré que lorsque les poils ne repoussent pas entre chacun des traitements, le système pileux sera moins dense.

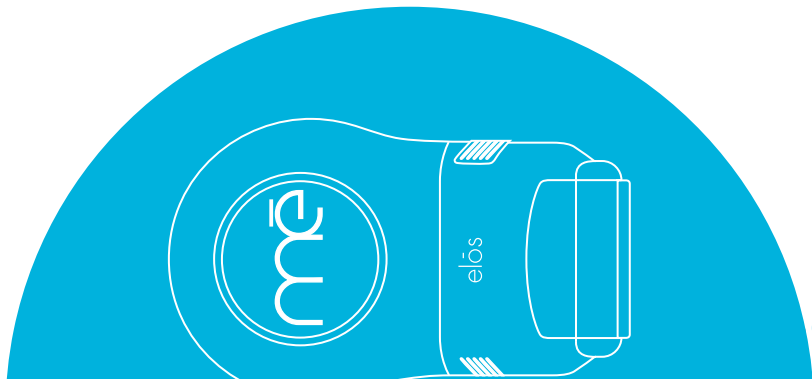

1

Qu'est-ce que la synergie électro-optique (elös) ?

La synergie électro-optique (elös) est une technologie unique et brevetée qui permet l'épilation des poils gênants. Elle combine deux types d'énergies, la lumière pulsée intense (IPL) et la radiofréquence (RF), pour épiler les poils en ciblant les follicules pileux de manière sélective, de façon sûre et efficace.

Inventée par le Dr. Shimon Eckhouse, la technologie elös était exclusivement réservée aux médecins par le biais d'appareils d'épilation professionnels. Elle est aujourd'hui mise à la disposition directe des consommateurs, grâce au système mē.

Comment la synergie électro-optique (elös) fonctionne-t-elle ?

La technologie (elös) émet sélectivement de la chaleur, à partir de l'énergie IPL et RF, sur le follicule pileux, affectant la source où pousse le poil. Le follicule pileux est détruit, supprimant et réduisant ainsi les poils laissés sur la zone traitée. La technologie elös peut être utilisée de manière sûre et efficace sur tous les types de peau, y compris sur les peaux naturellement foncées.

Cycle de croissance du poil

Chaque poil de notre corps passe par un cycle complet de croissance, de la phase active à la phase de repos. Le traitement à base de lumière fonctionne mieux sur les poils dans leur phase active.

La durée de chaque cycle varie d'une personne à l'autre et selon la partie du corps traitée. D'autres facteurs tels que des éléments génétiques, le métabolisme et l'âge influencent aussi la durée de chaque phase de croissance.

Que pouvez-vous attendre du traitement

Il vous faudra traiter les zones pileuses indésirables à plusieurs reprises afin de cibler les poils dans leur phase active.

Une fois qu'un follicule pileux est traité, une ou deux semaines sont nécessaires pour que le poil tombe.

Durant cette période, vous pourriez avoir l'impression que les poils repoussent, mais ils sont, en fait, "poussée au dehors".

Il se peut que vous ne voyiez pas ces poils se retirer de la peau.

Contenu de l'emballage :

Vous trouverez les éléments suivants en ouvrant l'emballage :

- L'appareil mē, une cartouche et un capuchon de protection déjà installé
- Adaptateur spécial visage
- Capuchon de protection (déjà installé)
- Capuchon de protection elōs
- Un câble d'alimentation électrique
- Le manuel de l'utilisateur
- Lunettes de protection pour traitement facial
- Une brosse de nettoyage


Autres accessoires :

Vendus séparément.

- Rasoir
- Épilateur
- Cartouche elōs de rechange


L'appareil mē est composé des éléments suivants:

1. L'unité de base
2. Un socle
3. Le panneau de commande comprenant : (montrer les croquis à tous)
Bouton de mise en marche
Boutons des niveaux d'énergie elōs
Voyant signalant quand la cartouche elōs est terminée et doit être changée
Bouton d'activation accessoire
4. Applicateur (pièce à main avec câble)
5. Cartouche elōs avec fenêtre de sortie elōs et barres de contact RF.

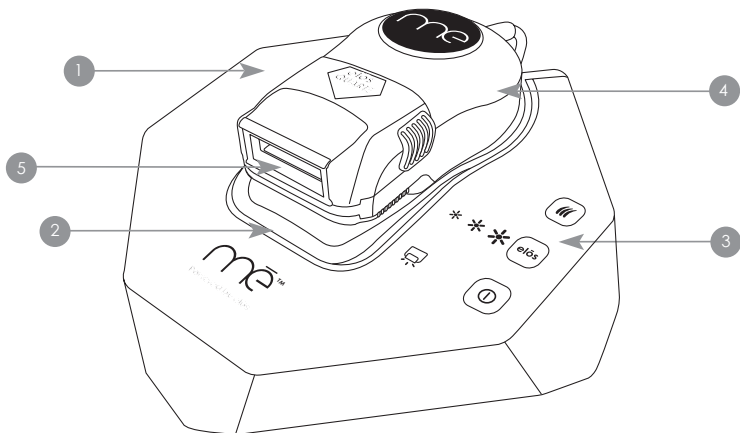

Sur l'applicateur et la cartouche, vous trouverez

1. Fenêtre de sortie des impulsions elōs.
2. Les barres d'émission RF en contact avec la peau : les 2 barres RF doivent être entièrement en contact avec la peau pour que les impulsions lumineuses produisent des flashes.
3. Cartouche : la cartouche est reliée à l'applicateur et elle pré-chargée avec des impulsions lumineuses. Remplacez la cartouche lorsque le voyant situé sur l'unité de la base est rouge.
4. Bouton d'activation elos.
5. Sortie de refroidissement.
6. Capuchon de protection.

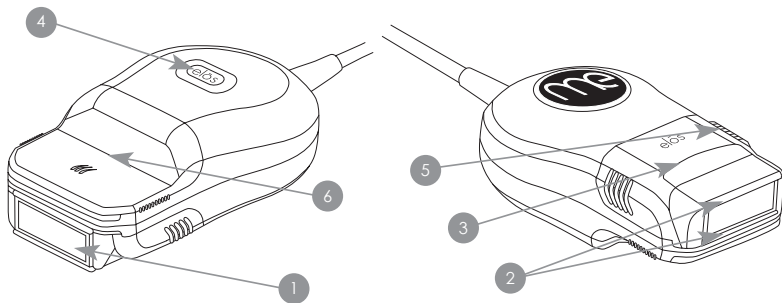

Remarque : Si vous n'avez pas de cartouche de rechange, assurez-vous de mettre le capuchon de protection elōs à la place de la cartouche usagée; ceci, afin de protéger les pièces internes de l'applicateur.

Consignes de sécurité importantes

Consignes de sécurité importantes - À lire avant d'utiliser l'appareil !

Veillez lire l'ensemble des avertissements et des informations concernant la sécurité contenus dans le manuel de l'utilisateur avant d'utiliser l'appareil me. Veillez à toujours suivre les précautions de sécurité élémentaires lorsque vous utilisez un appareil électrique. me ne peut pas être utilisé par tout le monde. Lisez le présent manuel avant d'utiliser l'appareil. Veillez à respecter tous les avertissements. Veillez également à ne pas utiliser l'appareil s'il ne vous convient pas (voir la section Contre-indications cidessous).

Quand ne pas utiliser me/Contre-indications

- **NE PAS** utiliser l'appareil si vous êtes bronzé(e) ou avez un coup de soleil, après exposition au soleil ou à des UV artificiels ou après application d'une crème auto-bronzante. Cela pourrait entraîner un blanchiment temporaire ou permanent de la peau. Attendez que le coup de soleil ou le bronzage disparaisse (2 semaines) avant d'utiliser l'appareil.
- **NE PAS** exposer au soleil les zones traitées. Attendez au moins 24 heures après le traitement avant d'exposer la peau traitée au soleil ou à des UV artificiels. Même après 24 heures, vérifiez qu'aucune rougeur n'est apparue sur la peau traitée avant de vous exposer au soleil. Protégez bien la peau traitée en appliquant un écran solaire pendant toute la durée du traitement.
- **NE PAS** utiliser l'appareil si vous êtes enceinte ou essayez de l'être ou si vous allaitez. me n'a pas été testé sur les femmes enceintes ou qui allaitent.
- **NE PAS** utiliser l'appareil si vous souffrez d'épilepsie, de convulsions dues à la lumière ou de migraines. Les flashes peuvent provoquer de violents maux de tête et migraines.
- **NE PAS** utiliser l'appareil sur les tatouages ou les taches brunes (taches de rousseur, taches de naissance, grains de beauté ou verrues). Les tatouages ou les grains de beauté peuvent absorber une trop grande quantité d'énergie lumineuse et entraîner une tumescence de la peau, des boursouffures temporaires ou permanentes ou une décoloration/un blanchiment de la peau.

NE PAS utiliser l'appareil autour des yeux, sur la tête, les oreilles, les mamelons, les organes génitaux ou autour de l'anus. Cela pourrait entraîner une tumescence de la peau, des boursoufflures temporaires ou permanentes ou une décoloration/un blanchiment de la peau.

NE PAS utiliser l'appareil si vous êtes âgé de moins de 18 ans. Les effets de l'utilisation du mē sur ce groupe d'âge sont inconnus.

NE PAS utiliser l'appareil si vous présentez un quelconque symptôme dans la zone de traitement, comme de l'acné, des plaies, du psoriasis, de l'herpès, de l'eczéma, des brûlures, de l'herpès simplex, des blessures ou une éruption cutanée. Ces symptômes peuvent rendre la peau plus sensible à la lumière et le traitement pourrait donner une sensation d'inconfort ou causer un gonflement de la peau, des cloques ou une infection. Attendez que les zones infectées soit guéries avant d'utiliser l'appareil. Si vous n'êtes pas sûr du niveau de cicatrisation de votre peau pour utiliser l'appareil, consultez votre médecin.

AVERTISSEMENTS

- **NE PAS** ouvrir le boîtier extérieur de l'appareil ou toucher les pièces internes. Ne tentez pas de réparer votre appareil. Essayer d'ouvrir le système peut également endommager l'appareil et entraîner l'annulation de votre garantie. Veuillez contacter le service clientèle si l'appareil est cassé ou endommagé et doit être réparé. Le non-respect de ces avertissements peut causer une électrocution ou un choc électrique.
- **NE PAS** utiliser l'appareil mē lorsqu'il rentre en contact avec des liquides ou se mouille (lavabo/baignoire/douche). Cela peut provoquer un choc électrique. Si le système tombe dans un liquide, débranchez-le immédiatement. Ne Pas retirer l'appareil du liquide avant de l'avoir débranché. Ne Pas réutiliser l'appareil. Contactez le centre de service clientèle.
- **NE PAS** tenir la fenêtre de l'applicateur immobile au-dessus d'une seule zone de la peau et émettre plusieurs flashes de lumière. Cela provoque une accumulation de chaleur et peut entraîner un gonflement de la peau, des cloques ou une modification temporaire ou permanente de la couleur de votre peau. Après chaque flash, déplacez la fenêtre de traitement sur une autre zone de la peau. **Attendez au moins 10 secondes avant de revenir à une zone déjà traitée.**

NE PAS utiliser mē si l'une de ses pièces semble endommagée. Vous risqueriez de vous blesser.

NE PAS couvrir les orifices de ventilation durant l'utilisation de l'appareil car elles permettent à l'appareil de refroidir pendant son fonctionnement. L'appareil pourrait alors surchauffer.

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS ! mē est un appareil puissant et ne doit pas être utilisé par une personne âgée de moins de 18 ans.

NE PAS laisser l'appareil sans surveillance en présence d'enfants. Les câbles présentent un risque d'étouffement. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

NE PAS utiliser mē si votre peau est sensible à la lumière. Le traitement par la lumière pourrait provoquer une sensation d'inconfort ou causer un gonflement de la peau, des cloques ou une infection. Afin de déterminer si vous pouvez utiliser mē, effectuez un test sur une petite parcelle de peau. Attendez 30 minutes pour vous assurer qu'aucune réaction cutanée ne se produit.

Si vous n'observez aucune réaction cutanée et que la peau semble normale, vous pouvez utiliser mē.

NE PAS utiliser mē sur une zone où vous souhaitez que vos poils repoussent.

NE PAS utiliser le système à une température supérieure à 30°C (86°F). Si l'appareil chauffe, il se peut qu'il ne fonctionne pas correctement et entraîne des blessures.

Effets secondaires possibles et réactions cutanées

Utiliser mē peut causer un certain nombre d'effets secondaires. Ces réactions sont rares et disparaissent rapidement. Tout traitement cosmétique peut comporter un certain degré de risque. Ces réactions sont décrites dans le tableau ci-dessous avec les traitements recommandés.

Réaction	Traitement recommandé
Changements de couleur ou de texture de la peau pouvant être définitifs	Peuvent se produire au moment du traitement ou après. S'il n'y a aucune amélioration dans les 24 heures, consultez votre médecin
Rougeurs sur la peau	Peuvent se produire au moment du traitement ou après. S'il n'y a aucune amélioration dans les 24 heures, consultez votre médecin
Démangeaisons sur la zone traitée	Rafraîchissez la zone avec des compresses froides (mais pas avec de la glace ou des poches de glace). Si les démangeaisons persistent, consultez un médecin
Crise d'acné	S'il n'y a aucune amélioration dans les 24 heures, consultez votre médecin
Des cloques ou des brûlures sur la peau	Rafraîchissez immédiatement la zone avec des compresses glacées/froides (mais pas avec de la glace ou des poches de glace). Contactez votre médecin
Des cicatrices permanentes ou perte de tissus de la peau et dépressions	Peuvent se produire au moment du traitement ou après. S'il n'y a aucune amélioration dans les 24 heures, consultez votre médecin
Des douleurs inhabituelles	Arrêtez le traitement et consultez votre médecin

Pour quel usage mē a-t-il été conçu ?

mē est un appareil en vente en magasin, conçu pour une réduction pileuse permanente.

Teint de peau

Mē est destiné à un usage corporel, sur TOUS types de peau (couleur de peau d'origine).



Couleur du poil

mē peut être utilisé sur TOUTES les couleurs de poil.

Remarque : pour des résultats efficaces, utilisez l'épilateur pour le traitement des poils naturellement blonds, roux et blancs/gris. L'épilateur ne doit pas être utilisé sur le visage.

Parties du corps

mē est destiné aux femmes et aux hommes, et peut être utilisé pour épiler les poils sur toutes les parties du corps situées en-dessous du cou, et sur le visage, sous les joues.



Remarque : le traitement facial est différent du traitement corporel. Veuillez à lire intégralement le manuel de l'utilisateur avant de commencer à utiliser l'appareil.

Fonctionnement

Étape 1 : préparation préalable à l'utilisation de mē

Enlevez les poils dans la zone que vous prévoyez de traiter (ou vous pouvez utiliser les accessoires épilateur/rasoir mē prévus à cet effet).

Étape 2 : Test de sensibilité de la peau

Avant d'utiliser le système pour la première fois, choisissez une petite zone à proximité de celle que vous avez l'intention de traiter, afin d'effectuer un test de sensibilité de la peau. Suivez les instructions de traitement ci-dessous. Après le test cutané, attendez 30 minutes puis vérifiez la réaction de votre peau. Si la peau semble normale et qu'il n'y a pas de rougeur ou d'autres réactions cutanées, vous pouvez effectuer un traitement complet sur le reste de la zone du corps. Pour le traitement complet, choisissez le réglage elōs avec lequel aucune réaction ne s'est produite.

Étape 3 : traitement avec mē

Body:

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation de l'unité de base pour allumer le système.
2. Appuyez sur le bouton elōs à la base et sélectionnez le niveau elōs approprié ('Low' [lent], 'Medium' [moyen] ou 'High' [élevé]). Il est recommandé de commencer par le niveau Low (lent) et d'augmenter ensuite la vitesse si vous ne constatez aucune gêne.
3. Si vous utilisez le rasoir/l'épilateur prévu à cet effet, branchez-le à la place du capuchon de protection et appuyez une fois sur le bouton accessoire du panneau de commande pour actionner le mécanisme d'épilation à vitesse lente. Si vous le souhaitez, appuyez à nouveau dessus pour faire fonctionner l'épilateur à vitesse élevée.

La cartouche du rasoir ne fonctionne qu'au niveau de vitesse 1.

4. Appuyez sur le bouton d'activation elōs de l'applicateur.
5. Placez l'applicateur sur la zone que vous voulez traiter en vérifiant que les deux barres en argent d'émission RF sont bien en contact avec la peau. N'appliquez aucune pression, il doit simplement effleurer la peau. Le système va commencer à envoyer des impulsions elōs.
6. Utilisez le système en procédant lentement et en faisant glisser en continu sur la zone de traitement sans vous arrêter sur un point précis.
Ne pas revenir sur un endroit déjà traité avant au moins 10 secondes.

Visage :

L'enlèvement des poils indésirables au niveau du visage est très différent de l'enlèvement des poils indésirables sur toute autre partie du corps. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant de commencer l'épilation du visage avec votre système mē.

Lors du traitement des poils du visage, il est recommandé d'utiliser l'adaptateur spécial visage.

L'adaptateur spécial visage est spécialement conçu pour traiter les zones plus sensibles et délicates du visage. Il envoie des impulsions en mode simple et au niveau d'intensité désiré.

L'adaptateur spécial visage peut être soit inclus dans ce coffret (en fonction des configurations) ou acheté séparément en tant qu'accessoire.

Couleurs de peau

Pensez à réaliser un test de sensibilité de la peau avant de commencer le traitement (consultez le mode d'emploi pour de plus amples informations).

1. Nettoyez votre peau et enlevez les poils à la surface de celle-ci. Vous pouvez utiliser des pinces à épiler, de la chaire, un rasoir, etc. Ne pas utiliser l'accessoire épilateur mē sur le visage car il n'est pas prévu à cet effet.
2. Utilisez un eye-liner blanc pour cacher les zones qui ne doivent pas être traitées, telles que le bord des lèvres et les grains de beauté sur le visage.
3. Choisissez un endroit spacieux et lumineux.
4. Allumez votre appareil mē et sélectionnez le premier niveau elōs sur l'unité de base, à savoir Low (lent). Mettez les lunettes de protection fournies ou des lunettes de soleil. Si vous avez un adaptateur spécial visage, retirez le capuchon de protection accessoire et branchez-le à la place. L'adaptateur spécial visage permettra au système d'envoyer des impulsions en mode simple, au niveau d'intensité désiré.
5. Appuyez sur le bouton d'activation de la cartouche elōs sur l'applicateur pour allumer celui-ci.
6. Positionnez doucement l'applicateur sur la zone que vous voulez traiter. Appuyez à nouveau sur le bouton d'activation de la cartouche elōs pour appliquer une simple impulsion. Si vous ne constatez aucune gêne, vous pouvez modifier le niveau elōs en passant de Lent ('Low') à Moyen ('Medium') ou Elevé ('High').
7. Repositionnez l'applicateur sur la zone suivante à traiter et appuyez à nouveau sur le bouton d'activation de la cartouche elōs pour appliquer une autre impulsion. Répétez les étapes précédentes jusqu'à ce que toute la surface du visage soit couverte. Attendez au moins 10 secondes avant de traiter à nouveau le même endroit.

Remarque : Commencez par le niveau elōs lent ('LOW'). Si vous ne constatez aucune gêne, vous pouvez augmenter le niveau elōs pour obtenir de meilleurs résultats.

Conserver une peau lisse

Pour un résultat optimal, utilisez mē sur la même zone du corps une fois par semaine pendant les 7 premières semaines de traitement. Procéder à des séances de traitement supplémentaires après les 7 premières semaines améliorera les effets de l'épilation.

Nous recommandons de traiter le visage toutes les 1 à 2 semaines.



Remarque : Si vous estimez que les poils sont trop visibles, vous pouvez traiter la zone concernée tous les 2 jours.

Durées du traitement

Pour un résultat optimal, mē doit être utilisé en respectant le tableau suivant :




Remarque : Commencez au niveau eLōS LENT ('LOW'). Si vous ne constatez aucune gêne, augmentez le réglage eLōS pour une plus grande efficacité.

vous avez terminé avec mē ?

1. Éteignez le système mē en appuyant sur le bouton d'alimentation de l'unité de base.
2. Placez l'applicateur à sa place dans l'unité de base et débranchez l'appareil de la prise électrique.
3. Nettoyez la fenêtre de sortie lumineuse de la cartouche à l'aide d'une lingette sans alcool ou d'un chiffon doux humidifié, ainsi que les accessoires.
4. Rangez le système dans un endroit frais et sec, HORS de portée des enfants.
5. Rincez votre peau avec de l'eau tiède et tapotez doucement à l'aide d'une serviette pour sécher.
6. Appliquez avec douceur de la crème hydratante ou du gel d'aloë vera sur votre peau.

Nettoyage et stockage

1. Reposez l'applicateur sur son socle, sur l'unité de base.
2. Éteignez votre appareil mē en appuyant sur le bouton d'alimentation situé sur l'unité de base.
3. Rincez délicatement la peau à l'eau tiède.
4. Appliquez une crème hydratante sur votre peau.
5. Débranchez le système de la prise murale.
6. Nettoyez la fenêtre de sortie de la lumière sur la cartouche avec un tissu doux ou une lingette humide sans alcool.
7. Si vous avez utilisé l'épilateur ou le rasoir mē : retirez le rasoir ou l'épilateur de l'applicateur et remettez le capuchon de protection à la place. Nettoyez les accessoires avec la brosse de nettoyage fournie. Il est conseillé d'utiliser également un tissu doux ou une lingette humide sans alcool.
8. Si vous avez utilisé l'adaptateur facial mē : retirez l'adaptateur facial de l'applicateur et remettez le capuchon de protection à la place. Nettoyez la surface extérieure **UNIQUEMENT** avec un tissu doux ou un lingette humide sans alcool.
9. Nettoyez la surface extérieure du système mē **UNIQUEMENT** avec un tissu doux ou une lingette humide sans alcool.
10. Rangez l'appareil dans un endroit frais et sec, hors de portée des enfants.

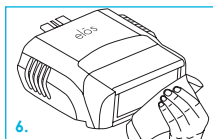

Soins post-traitement


Rincez votre peau avec de l'eau tiède et tapotez doucement à l'aide d'une serviette pour sécher.

Pensez à bien protéger la peau traitée avec un écran solaire pendant toute la période de l'épilation. Ne pas respecter ces précautions pourrait entraîner l'apparition de cloques, boursofflures, une décoloration temporaire ou permanente de la peau ou un blanchiment ou assombrissement de la peau.

Comment remplacer la cartouche/le rasoir/ l'épilateur/l'adaptateur facial



Remplacement de la cartouche

1. Vérifiez que l'appareil est éteint et qu'il est débranché de la prise murale.
2. Retirez l'ancienne cartouche de l'applicateur en tirant doucement dessus.
3. Jetez-la en respectant les normes décrites page 16.
4. Sortez la nouvelle cartouche de son boîtier de protection. Évitez de toucher le verre. Des marques de doigts ou des taches grasses empêcheraient la lumière de passer à travers le verre, réduisant ainsi les résultats du traitement.
5. Faites-la glisser délicatement dans l'applicateur jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
6. Avant d'allumer le système me, l'applicateur doit être placé sur le socle de l'unité de base.

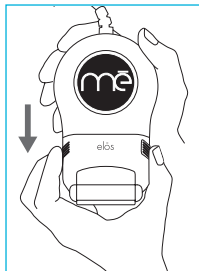

Remplacement du rasoir, de l'épilateur ou de l'adaptateur facial mē


1. Vérifiez que l'appareil est éteint et qu'il est débranché de la prise murale.
2. Retirez le capuchon de protection de l'applicateur en tirant doucement dessus.
3. Sortez le rasoir, l'épilateur ou l'adaptateur facial de son boîtier de protection. Faites-le glisser délicatement dans l'applicateur jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
4. Avant d'allumer le système mē, l'applicateur doit être placé sur le socle de l'unité de base.
5. Allumez le système mē. Votre appareil mē est prêt à l'emploi.

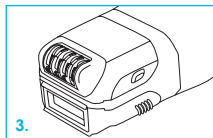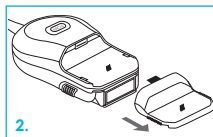

Mise au rebut de la cartouche

- a. Si vous ne disposez pas d'une nouvelle cartouche, remettez le capuchon de protection à la place de la cartouche usagée afin de protéger les pièces internes du système.
- b. Veuillez respecter les réglementations en matière de mise au rebut des systèmes électriques en vigueur dans votre pays de résidence pour le recyclage ou la mise au rebut de votre unité de base, de la pièce à main ou de la cartouche jetable.

Explication WEEE

 Le symbole indique que le produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans toute l'Union Européenne. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour renvoyer votre appareil usagé, prière d'utiliser le système de renvoi et collection ou contacter le revendeur où le produit a été acheté. Ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé tout en respectant l'environnement.

Voyager avec votre système mē

Le système mē a été conçu à une tension universelle. Cela signifie que vous pouvez l'utiliser partout dans le monde. Il vous faudra néanmoins utiliser un adaptateur pour la prise, puisque les prises électriques murales varient selon les pays. Veillez à ce que le système mē ne se mouille pas durant vos déplacements.

NE PAS l'utiliser dans un environnement humide.

Dépannage

Voyant	Signification	Que faire
Tableau de commande		
Aucun voyant ne s'allume.	Le câble d'alimentation n'est pas branché.	Brancher le câble d'alimentation.
Tous les voyants de niveau d'énergie elōs clignotent.	Aucun niveau d'énergie elōs n'a été sélectionné.	Sélectionner un niveau elōs. Le système de soufflerie de l'applicateur va s'enclencher, indiquant que la cartouche est activée.
Le bouton d'activation elōs clignote.	Un niveau d'énergie elōs a été sélectionné. Le bouton d'activation elōs s'allume, indiquant qu'il faut appuyer dessus.	Appuyer sur le bouton d'activation elōs. Le système de soufflerie de l'applicateur va s'enclencher, indiquant que la cartouche est activée.
Le voyant d'alimentation est orange.	Une erreur a été détectée.	Réinitialiser : <ol style="list-style-type: none"> Débrancher le cordon d'alimentation électrique. Attendre que tous les voyants s'éteignent (environ 2 minutes). Rebrancher le cordon d'alimentation électrique et allumer le système. Choisir une pièce, où la température ambiante est plus fraîche (inférieure à 30 degrés Celsius) pour allumer à nouveau le système.
Aucun voyant ne clignote sur la fenêtre de traitement de la cartouche.	<ol style="list-style-type: none"> Les barres de contact RF ne sont pas en contact avec la peau dans la zone de traitement. Le bouton d'activation de la cartouche n'est pas enfoncé. 	Afin que le système puisse émettre des impulsions, s'assurer que les 3 conditions sont remplies : barres de contact RF en contact avec la peau, bouton d'activation de la cartouche enfoncé, niveau elōs sélectionné.

Applicateur		
Le bouton d'énergie eIos de la base clignote.	La fente de la cartouche est vide.	Insérer le capuchon de protection cartouche ou une cartouche.
Le bouton d'activation accessoire de la base s'illumine.	La fente de l'accessoire est vide.	Insérer l'adaptateur spécial visage ou l'accessoire (rasoir/épilateur) ou un capuchon de protection.
L'indicateur de niveau de la cartouche clignote.	Le volume du générateur d'impulsions dans la cartouche est faible.	Préparer une cartouche neuve en vue du remplacement.
L'indicateur de niveau de la cartouche reste allumé.	Le générateur d'impulsions dans la cartouche eIos est vide.	Insérer une nouvelle cartouche eIos.
Autre		
Des rougeurs apparaissent sur ma peau après le traitement.	Il se peut que le traitement provoque des rougeurs sur la peau. Ces rougeurs disparaissent en général dans les 24 heures.	Si les rougeurs persistent pendant plus de 24 heures après le traitement, cessez immédiatement le traitement et consultez votre médecin ou le service clientèle.
Je remarque à peine l'épilation.	Suivez scrupuleusement le protocole recommandé et respectée la durée de traitement recommandé.	Les résultats varient d'une personne à l'autre, selon la zone traitée et en fonction du respect des instructions. Contactez le service clientèle en cas de besoin.
Je ressens une certaine douleur et de la chaleur lorsque j'applique les flashes de lumière. Est-ce normal ?	Il se peut que ressentiez des sensations de chaleur, de picotement et de démangeaison. Les sensations de douleur et de chaleur devraient diminuer.	Si la douleur devient plus forte ou persiste pendant plus de 24 heures après le traitement, cessez immédiatement le traitement et consultez votre médecin ou le service clientèle.

Garantie et service

HoMedics garantit ce produit contre tout défaut de matière et de fabrication pendant 2 ans à compter de la date d'achat, excepté dans les cas mentionnés ci-dessous.

Cette garantie produit HoMedics ne couvre pas tout dommage occasionné par un usage incorrect ou abusif, un accident, le raccordement de tout accessoire non autorisé, la modification du produit ou par toute autre situation, de quelque nature qu'elle soit, indépendante de HoMedics. Cette garantie est valable uniquement si le produit est acheté pour être utilisé au R.-U. et au sein de l'UE. Cette garantie ne couvre pas un produit qui nécessite des modifications ou adaptations permettant de le faire fonctionner dans tout autre pays que celui pour lequel il a été conçu, fabriqué, approuvé et/ou autorisé, ou toute réparation de produits endommagés par ces modifications. HoMedics ne saurait être tenu pour responsable de tous types de dommages imprévus, indirects ou spéciaux.

Pour que votre produit bénéficie du service de garantie, vous devez le retourner en port payé à votre centre service local, accompagné du récépissé de vente daté (comme justificatif d'achat). Reportez-vous à la brochure d'information du 'Centre Service HoMedics' pour les coordonnées de votre centre service local. À réception, HoMedics réparera ou remplacera votre produit, selon le cas, et vous le réexpédiera en port payé. La garantie s'applique exclusivement au Centre Service HoMedics. Tout entretien de ce produit effectué par tout service d'assistance autre qu'un Centre Service HoMedics annule la garantie.

Cette garantie n'affecte en rien vos droits statutaires.

Contact service clientèle :

Distec International,
Z.I."Les Portes de l'Europe",
Rue Maurice Faure 1, 1400 Nivelles,
Belgique.

Tél : +32-67-874821

Courriel : support@distec.be

Informations relatives au fabricant

mē est fabriqué par Syneron Medical Ltd. Et distribué au Royaume-Uni et en Irlande par HoMedics Group Ltd. Syneron Medical Ltd. Se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits ou caractéristiques techniques sans préavis en vue d'améliorer la performance, la fiabilité ou la faisabilité des produits. Les informations fournies par Syneron Medical Ltd. and HoMedics Group Ltd. sont considérées comme exactes et fiables. Toutefois, Syneron Medical Ltd. Et HoMedics Group Ltd. n'expriment aucune opinion quant à la pertinence de celles-ci et déclinent toute responsabilité concernant leur usage. Aucune licence n'est accordée, que ce soit implicitement ou autrement, à de quelconques brevets ou droits de brevets de Syneron Medical Ltd. Syneron Medical Ltd. est détenteur des brevets, demandes de brevet en attente, marques commerciales, copyrights ou autres droits de propriété intellectuelle couvrant le produit me.

L'achat du produit mē et la fourniture de ce document n'autorise en aucune manière l'utilisation de ces brevets, marques commerciales, copyrights ou autres droits de propriété intellectuelle sauf si expressément accordé par Syneron Medical Ltd. au moyen de tout document écrit officiel. Assurez-vous de lire attentivement toutes les instructions avant de commencer le traitement.

Copyright © 2012 HoMedics Group Ltd. Tous droits réservés.

Étiquettes et symboles

L'étiquette signalétique est collée sur la base de votre système mē. Elle indique le nom et l'adresse du fabricant, le numéro des pièces et de série du système, les spécifications électriques et les normes réglementaires auxquelles doit se conformer le système.



Do Not use in wet environment



Class II equipment



Degree of protection against electric type BF applied part



WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment



CE Mark



Follow operating instructions



This device comply with Part 15 of the (FCC) Federal Communications Commission Rules



CSA Mark for USA and Canada

Degré de protection contre la pénétration de l'eau : ordinaire.
Ce dispositif n'est pas adapté à une utilisation en présence de mélange anesthésique inflammable avec de l'air, de l'oxygène ou de l'oxyde nitreux.

Spécifications

Spectre lumineux : 550 – 1 200 nm
Optique max. : 4J/cm²
Fréquence d'ondes RF : 6.78 MHz
Max Radiofrequency power : 5 watts
RF transportée 5 J/cm²

Normes applicables :

Normes de sécurité

EN 60335:1 2002(A1:2004; A2:2009)
EN 60335-2-8
EN 60335-2-23: 2003
EN 60335-2-27: 2003
EN 60825-9
IEC 60601-1, 3e édition
IEC 60601-1, 2e édition
IEC 60601-1-11

Normes EMC

EN 61000-6-1:2007
EN 61000-6-3:2007

Tension nominale : 100-240 VCA, 50-60 Hz
Dimensions et poids : 20,5 x 15 x 9 cm [La x
Lo x H] 1,17 Kg

Conditions acceptables pour l'environnement Stockage et transport

Température 10°C - 55°C (50°F- 131°F)
Humidité 90% à 55°C (131°F)
Pression 700-1060hPa

Fonctionnement :

Température 10°C - 30°C (50°- 86°F)
Humidité relative jusqu'à 80% at 37°C (99°F)
Altitude jusqu'à 3900 m (13 000 pi)

Remarque : le système ne fonctionne pas à une température supérieure à 30°C (86°F). Si le système a été stocké dans un endroit très humide, laissez-le sécher pendant une heure avant de l'utiliser.

HOMEDICS®

Validez votre garantie de mē et recevez des mises à jour de produits et des offres spéciales.
sur www.memyelos.com



© Janvier 2013. Tous droits réservés. Syneron et mē sont des marques de Syneron Beauty Ltd.
et peuvent être déposées dans certaines juridictions. Publication 0113, RÉV. 01