


HOMEDICS

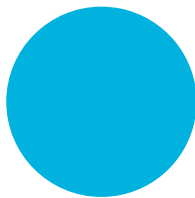

mē

Sistema profissional para eliminação de
pêlos elös™

Manual do Utilizador

Índice

Introdução	1
O que é a sinergia electro-óptica (elōs)?	2
Conteúdo da embalagem	3
Importantes informações de segurança	6
Possíveis efeitos secundários e reacções cutâneas	9
Qual a finalidade do mē?	10
Como utilizar o seu sistema mē	11
Limpeza e arrumação	14
Como substituir o cartucho/máquina de barbear/depiladora/adaptador para o rosto	15
Viajar com o seu sistema mē	17
Resolução de problemas	18
Garantia e assistência	20
Informações sobre o fabricante	21
Especificações	23


Introdução...

P

Parabéns pela aquisição do sistema mē! O mē é um dispositivo inovador que pode ser utilizado no conforto e na privacidade do lar para tratar da pilosidade indesejada. O mē é o único dispositivo de remoção permanente de pêlos de uso doméstico a utilizar a tecnologia elōs patenteada e foi clinicamente comprovado como seguro e eficaz em todos os tons de pele. Suave, fácil de utilizar e com apenas alguns minutos por tratamento, pode agora usufruir da liberdade de uma pele sedosa e macia sem a confusão do barbear e depilar.

Prevenção eficaz do reaparecimento dos pêlos

A redução de pilosidade consiste num processo gradual e cumulativo. Os nossos estudos clínicos demonstraram que a utilização do mē origina uma diminuição do crescimento da pilosidade. O tempo que demora a obter resultados visíveis e a duração dos resultados variam de pessoa para pessoa. Recomendam-se tratamentos periódicos para a manutenção destes resultados. Estudos clínicos revelaram que quando os pêlos voltam a crescer entre cada tratamento, serão em menor quantidade.

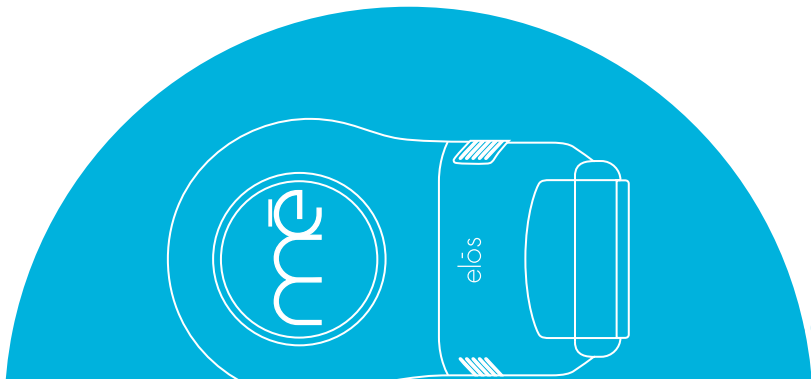

1

O que é a sinergia electroóptica (elôs)?

A sinergia electroóptica (elôs) é a exclusiva e patenteada tecnologia que está na base da capacidade de remoção de pilosidade indesejada do mē. Combina dois tipos de energia – luz pulsada intensa (IPL, Intense Pulsed Light) e radiofrequência (RF) – para remover os pêlos, atingindo selectivamente o folículo do pêlo de forma segura mas eficaz.

Inventada pelo Dr. Shimon Eckhouse, a tecnologia elôs estava disponível exclusivamente aos médicos, através de dispositivos de remoção de pilosidade profissionais. Contudo, está agora disponível directamente ao consumidor, através do dispositivo mē.

Como funciona a sinergia electroóptica (elôs)?

A tecnologia elôs administra selectivamente calor de energia IPL e RF ao folículo piloso pêlo, afectando a respectiva fonte de crescimento. O folículo piloso é destruído, removendo e reduzindo assim a quantidade de pilosidade que resta na área tratada. A tecnologia elôs pode até ser utilizada segura e eficazmente em todos os tipos de pele, incluindo pele naturalmente escura.

Ciclo de crescimento do pêlo

Cada pêlo no nosso corpo atravessa um ciclo de crescimento completo, de uma fase activa até uma fase de repouso. Os tratamentos baseados em luz funcionam melhor em pêlos na sua fase activa.

A duração de cada ciclo varia de pessoa para pessoa e entre as diferentes partes do corpo. Outros factores, como a genética, o metabolismo e a idade, também influenciam a duração de cada ciclo de crescimento.

O que esperar do tratamento

Será necessário tratar as áreas com pilosidade indesejada várias vezes para atingir os pêlos no ciclo activo.

Após o tratamento de um folículo piloso, pode demorar uma a duas semanas até que o pêlo caia.

Durante esse período, pode parecer que o pêlo ainda está a crescer mas, na realidade, o pêlo está a ser "empurrado para fora".

Pode ou não ver estes fragmentos de pêlo a serem "empurrados para fora" da pele.

Conteúdo da embalagem

Encontrará os seguintes itens na embalagem do mē:

- Sistema mē com um cartucho e a tampa de protecção já instalados
- Adaptador facial
- Tampa de protecção (já instalada)
- Tampa de protecção elōs
- Cabo de alimentação
- Guia do utilizador
- Óculos de protecção para tratamento facial
- Escova de limpeza


Acessórios adicionais

Vendido em separado

- Acessório para barbear
- Acessório para depilar
- Cartucho de substituição elōs


O mē inclui os seguintes componentes

1. Unidade base.
2. Suporte.
3. Painel de controlo com:
botão de alimentação
botões de definição de energia elōs
indicador de cartucho elōs vazio e necessidade de substituição
botão de activação do acessório
4. Aplicador (peça de mão com cabo).
5. Cartucho elōs com janela de saída elōs e barras de contacto de RF.

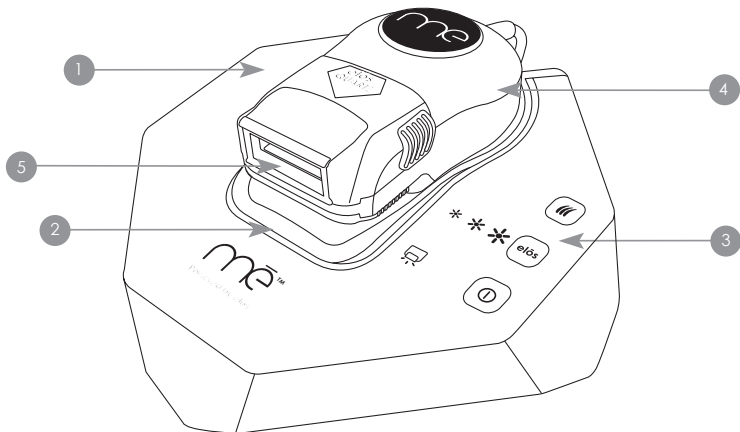

No aplicador e no cartucho encontrará

1. Janela de saída de impulsos elêos.
2. Barras de RF de contacto com a pele: As 2 barras de RF têm de estar completamente em contacto com a pele para que os impulsos de luz sejam emitidos intermitentemente.
3. Cartucho: O cartucho vem encaixado no aplicador e pré-carregado com impulsos de luz. Será necessário substituir o cartucho quando a luz indicadora "Empty" (Vazio) na unidade base aparecer a vermelho.
4. Botão de activação elêos.
5. Saída de arrefecimento.
6. Tampa de protecção.

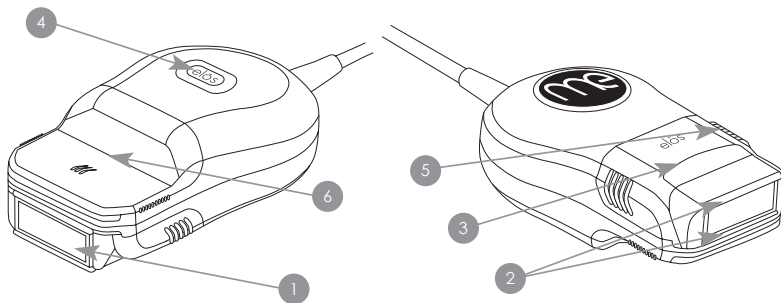

Nota: Se não tiver um cartucho sobressalente, certifique-se de que coloca a tampa de protecção elêos no lugar do cartucho usado. Deste modo, protegerá os componentes internos do aplicador.

Informações de segurança importantes

Informações de segurança importantes – leia antes de utilizar!

Leia todas as advertências e informações de segurança do manual do utilizador antes de utilizar o sistema mē.

Quando utilizar qualquer produto eléctrico, respeite sempre as precauções básicas de segurança.

O mē não foi concebido para todos. Leia este manual do utilizador antes de o utilizar. Certifique-se de que respeita todas as advertências. Além disso, não utilize o dispositivo se não for adequado para si (consulte a secção “Contra-indicações” abaixo).

Quando não utilizar o mē/Contra-indicações

- **NÃO** utilize se a sua pele estiver bronzada ou queimada devido a exposição solar ou solário ou à aplicação de cremes bronzadores (auto-bronzadores). Isto pode provocar o branqueamento temporário ou até permanente da pele. Aguarde 2 semanas até que a queimadura ou o bronzeado desapareça antes de utilizar o sistema.
- **NÃO** exponha as áreas tratadas ao sol. Aguarde pelo menos 24 horas após o tratamento antes de expor a pele tratada ao sol ou a bronzeamento com luz artificial. Mesmo após 24 horas, certifique-se de que a pele tratada não apresenta rubor devido ao tratamento antes de a expor ao sol. Proteja cuidadosamente a pele tratada com protector solar durante o período de remoção de pilosidade.
- **NÃO** utilize se estiver grávida, a tentar engravidar (gestação) ou a amamentar. O mē não foi testado em mulheres em período de gravidez ou amamentação.
- **NÃO** utilize se sofrer de epilepsia ou convulsões ou enxaquecas induzidas por luzes. As emissões de energia intermitentes podem provocar dores de cabeça e enxaquecas graves.
- **NÃO** utilize sobre tatuagens ou pontos castanho-escuros ou negros (como sardas escuras, marcas de nascença ou verrugas). As tatuagens ou pontos escuros podem absorver demasiada energia de luz, o que poderá provocar tumefacção cutânea, bolhas temporárias ou permanentes, descoloração cutânea ou branqueamento cutâneo.

- **NÃO** utilize em torno dos olhos, na cabeça, nas orelhas, nos mamilos, nos genitais ou em torno do ânus. A utilização nestas áreas poderá provocar tumefacção cutânea, bolhas, descoloração cutânea temporária ou branqueamento cutâneo.
- **NÃO** utilize se tiver menos de 18 anos. Desconhecem-se os efeitos da utilização do mē neste grupo etário.
- **NÃO** utilize se tiver qualquer condição cutânea na área do tratamento, incluindo acne, chagas, psoríase, eczema, queimaduras, herpes simplex, feridas ou erupção. Estas condições podem tornar a pele mais sensível ao tratamento com luz e poderão tornar o tratamento desconfortável ou provocar inchaço cutâneo, erupções ou infecção. Aguarde até que a área afectada cicatrize antes de utilizar. Se não tiver a certeza de que a sua condição cutânea está suficientemente cicatrizada para permitir a utilização do dispositivo, consulte o seu médico.

ADVERTÊNCIAS

- **NÃO** abra a tampa exterior do mē nem toque em nenhum dos componentes internos. Não tente reparar o seu dispositivo. Tentar abrir o sistema também pode danificar o dispositivo e irá invalidar a sua garantia. Contacte o Atendimento ao Cliente se tiver um dispositivo quebrado ou danificado que precise de ser reparado. O não seguimento destas advertências poderá originar electrocussão ou choque eléctrico.
- **NÃO** utilize o mē onde possa entrar em contacto com líquidos ou ficar molhado. Tal pode provocar choque eléctrico. Se deixar o sistema cair dentro de algum líquido, desligue-o imediatamente. Não remova o sistema do líquido enquanto não o desligar da tomada. Não volte a utilizar o sistema e contacte o Atendimento ao Cliente.
- **NÃO** mantenha a janela do aplicador imóvel sobre um ponto na pele e não aplique vários impulsos de luz intermitentes sobre a pele. Tal provoca demasiada acumulação de calor e poderá originar inchaço cutâneo, erupções ou mudanças temporárias ou permanentes na cor da sua pele. Após cada emissão intermitente, desloque a janela de tratamento para um ponto de pele adjacente. **Aguarde pelo menos 10 segundos antes de regressar a um ponto de pele previamente tratado.**

- **NÃO** utilize o mē se algum componente apresentar sinais de danos. Caso contrário, pode provocar lesões.
- **NÃO** cubra quaisquer ranhuras de ventilação durante a utilização, dado que ajudam a manter o dispositivo frio durante o funcionamento. Cobrir as ranhuras de ventilação poderá originar sobreaquecimento do dispositivo.
- **MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS!** O mē é um dispositivo potente e não deve ser utilizado por ninguém com idade inferior a 18 anos.
- **NÃO** deixe o mē perto de crianças sem supervisão, dado que os cabos representam um perigo de estrangulamento. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- **NÃO** utilize se a sua pele for sensível à luz. Esta condição poderá tornar o tratamento de luz desconfortável ou provocar inchaço cutâneo, erupções ou infecção. Para determinar se pode utilizar o mē, realize um teste numa pequena extensão de pele. Depois, aguarde 30 minutos para verificar se desenvolve quaisquer reacções cutâneas.
Só pode utilizar o mē se não se tiverem desenvolvido nenhuma reacções cutâneas e se a pele parecer normal.
Consulte os passos para o teste na página 20.
- **NÃO** utilize o mē em qualquer área onde queira que os pêlos voltem a crescer.
- **NÃO** utilize o sistema em temperaturas superiores a 30 °C. Se o sistema aquecer, pode não funcionar correctamente e provocar lesões.

Possíveis efeitos secundários e reacções cutâneas

P

A utilização do sistema mē pode provocar possíveis efeitos secundários. Estas reacções são raras e devem ficar resolvidas num curto período de tempo. Porém, todos os tratamentos cosméticos podem envolver um certo grau de risco. A tabela abaixo descreve possíveis reacções raras, juntamente com a acção recomendada.

Reacção	Acção recomendada
Alterações de cor ou textura na pele que poderão ser permanentes	Podem ocorrer no momento do tratamento ou depois. Caso não se verifiquem melhorias em 24 horas, consulte o seu médico.
Rubor da pele	Pode ocorrer no momento do tratamento ou depois. Caso não se verifiquem melhorias em 24 horas, consulte o seu médico.
Prurido na área tratada	Arrefeça a área com compressas frias (mas não com gelo ou sacos de gelo). Se o prurido continuar, consulte o seu médico.
Deflagração de acne	Caso não se verifiquem melhorias em 24 horas, consulte o seu médico.
Erupções ou queimaduras cutâneas	Arrefeça imediatamente a área com compressas frias (mas não com gelo ou sacos de gelo). Contacte o seu médico.
Cicatrizes permanentes ou perda de tecido cutâneo e depressões	Podem ocorrer no momento do tratamento ou depois. Caso não se verifiquem melhorias em 24 horas, consulte o seu médico.
Ocorrência de dor invulgar	Interrompa o tratamento e consulte o seu médico.

Qual é a utilização prevista do mē?

O mē destina-se à redução permanente de pilosidade indesejada.

Tom de pele

O mē destina-se a aplicação no corpo em TODOS os tipos de pele (a cor de pele com que nasceu).



Cor dos pêlos

O mē destina-se a utilização em TODAS as cores dos pêlos.

Nota: Para obter resultados eficazes no tratamento no corpo de pêlos louro-claros naturais, ruivos e brancos/cinzentos, é necessário o acessório para depilar. O acessório para depilar não deve ser utilizado no rosto.

Áreas corporais

O mē destina-se a utilização por mulheres e homens em pilosidade corporal abaixo da linha do pescoço e para utilização por mulheres em pilosidade facial abaixo da linha da bochecha.



Nota: O tratamento facial é diferente do tratamento corporal. Leia o guia do utilizador na íntegra antes de começar.

Instruções de utilização

Passo 1: preparar-se para o mē

Remova os pêlos da área que tenciona tratar (ou, em alternativa, utilize os acessórios da depiladora/máquina de barbear mē dedicados).

Passo 2: teste de sensibilidade da pele

Antes de utilizar o sistema pela primeira vez, escolha uma pequena área perto do local que pretende tratar para efectuar um teste de sensibilidade da pele. Siga as instruções de tratamento abaixo. Depois de realizar o teste na pele, espere 30 minutos e verifique se a sua pele apresenta alguma reacção. Se a pele parecer normal e não apresentar rubor nem outra reacção cutânea, então poderá realizar um tratamento completo na restante área corporal. Escolha a definição de elōs que não tenha provocado qualquer reacção para a realização de um tratamento completo.

Passo 3: tratamento com o mē

Corpo:

1. Para ligar o sistema, prima o botão de alimentação na unidade base.
2. Prima o botão elōs na base e seleccione o nível elōs apropriado ('Low' [Baixo], 'Medium' [Médio] ou 'High' [Alto]). Recomenda-se que comece pelo nível Baixo ('Low'), e caso se sinta confortável, escolha um nível elōs mais elevado.
3. Se utilizar a depiladora/máquina de barbear dedicada, ligue-a no lugar da tampa de protecção e prima uma vez o botão do acessório no painel de controlo para accionar o mecanismo da depiladora a baixa velocidade. Se desejar, prima novamente para accionar a depiladora a alta velocidade. O cartucho da máquina de barbear funciona apenas no nível 1.
4. Prima o botão de activação elōs no aplicador.
5. Coloque o aplicador na área que pretende tratar, garantindo um contacto completo das duas barras de aplicação de RF com a pele. Não exerça pressão; limite-se a tocar ao de leve na pele. O sistema começa a emitir impulsos de elōs.
6. Faça deslizar o aplicador lentamente e de modo contínuo sobre a área de tratamento sem parar em qualquer ponto específico. Não regresse a um ponto já tratado sem passarem pelo menos 10 segundos.

Rosto:

Remover pêlos indesejados do rosto é muito diferente de remover pêlos indesejados do corpo. Leia na íntegra o guia do utilizador antes de começar a remover pêlos

faciais com o mē. Quando tratar pêlos faciais, recomenda-se a utilização do **adaptador para rosto**.

O adaptador para rosto foi desenvolvido para tratar áreas mais pequenas e mais delicadas do rosto. Fornece energia no modo de impulso simples com o nível de energia desejado.

O adaptador para rosto pode ser incluído nesta embalagem (as configurações variam) ou adquirido separadamente como um acessório.

Tons da pele do rosto

Certifique-se de que realiza um teste de sensibilidade da pele antes de iniciar o tratamento (para mais informações, consulte o guia do utilizador).

1. Limpe a pele e remova os pêlos da superfície da pele. Pode utilizar pinças, cera, máquina de barbear, etc. Não utilize o acessório da depiladora mē no rosto visto que não se destina a uso facial.
2. Utilize eyeliner branco para esconder as áreas que não devem ser tratadas, por exemplo, os contornos dos lábios e verrugas no rosto.
3. Escolha um ambiente bem iluminado.
4. Ligue o dispositivo mē e escolha o primeiro nível elōs na unidade base, que é Baixo. Ponha os óculos de protecção fornecidos ou óculos de sol. Se tiver um adaptador para rosto, retire a tampa de protecção do acessório e ligue o adaptador para rosto. O adaptador para rosto permite que o sistema emita apenas impulsos simples com o nível de energia pretendido.
5. Para ligar o aplicador, prima o botão de activação do cartucho elōs no aplicador.
6. Posicione delicadamente o aplicador na área que deseja tratar. Prima novamente o botão de activação do cartucho elōs para aplicar um único impulso. Caso se sinta confortável, pode alterar o nível elōs de Baixo ('Low') para Médio ('Med' ou Alto ('High')).
7. Reposicione o aplicador na área seguinte a ser tratada e prima novamente o botão de activação do cartucho elōs para aplicar outro impulso. Repita estes passos anteriores até cobrir toda a área do rosto. Espere pelo menos 10 segundos antes de tratar sobre o mesmo ponto.

Nota: Comece com o nível elōs Baixo ('LOW'); caso se sinta confortável, poderá aumentar o nível elōs para obter melhores resultados.

Manter a pele macia

Para os melhores resultados, utilize o mē na mesma área do corpo uma vez por semana durante as primeiras 7 aplicações. A realização de tratamentos de manutenção adicionais, após os primeiros 7 tratamentos, contribuirá para uma maior duração dos resultados da remoção de pêlos. Recomendamos que trate o rosto a cada 1-2 semanas.



Nota: Se achar que os pêlos estão muito visíveis, é possível tratar essa área específica de 2 em 2 dias.

Durações dos tratamentos

Para resultados eficazes, o mē deve ser utilizado de acordo com a seguinte tabela:




Nota: Comece com o nível elôns BAIXO ('LOW'). Caso se sinta confortável, aumente o nível elôns para maior eficácia.

Acabou de utilizar o mē?

1. Desligue o sistema mē premindo o botão de alimentação na unidade base.
2. Coloque o aplicador no suporte na unidade base e desligue a unidade da tomada.
3. Limpe a janela de saída de luz do cartucho com um toalhete húmido que não seja à base de álcool ou um lenço macio e limpe também os acessórios.
4. Guarde o sistema num local fresco e seco FORA do alcance das crianças.
5. Lave a sua pele delicadamente com água morna e seque sem esfregar.
6. Aplique delicadamente um creme hidratante ou gel com Aloe Vera na pele.

Limpeza e arrumação

1. Coloque o aplicador no respectivo suporte na unidade base.
2. Desligue o sistema, premindo o botão de alimentação na unidade base.
3. Enxágue delicadamente a sua pele com água morna.
4. Aplique delicadamente um creme hidratante na sua pele.
5. Desligue o cabo eléctrico da tomada de parede.
6. Limpe a janela de saída de luz do cartucho com um toalhete húmido sem base de álcool ou com um lenço macio.
7. **Se tiver utilizado o acessório para depilar ou barbear do sistema mãe:** Remova o acessório para barbear ou depilar do aplicador e coloque aí a tampa de protecção. Utilize a escova de limpeza fornecida para limpar os acessórios. Recomenda-se a utilização de um lenço macio ou de um toalhete húmido sem álcool para a limpeza.
8. **Se tiver utilizado o adaptador facial do sistema mãe:** Remova o adaptador facial do aplicador e coloque aí a tampa de protecção. Limpe a superfície exterior utilizando APENAS um pano macio seco ou um toalhete húmido sem base de álcool.
9. Limpe a superfície exterior do sistema mãe utilizando APENAS um pano macio seco ou um toalhete húmido sem base de álcool.
10. Guarde o sistema num local fresco e seco FORA do alcance de crianças.

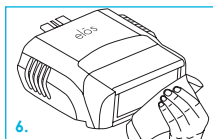


Cuidados após o tratamento

Lave a sua pele delicadamente com água morna e seque sem esfregar. Certifique-se de que protege cuidadosamente a pele tratada com protector solar durante o período de remoção de pêlos. Caso não cumpra esta advertência, pode provocar tumefacção cutânea, bolhas, descoloração temporária ou permanente da pele ou aclaramento ou escurecimento da pele.

Como substituir o cartucho/acessório para barbear/acessório para depilar/adaptador facial



Substituir o cartucho:

1. Certifique-se de que o sistema mē está desligado e de que o cabo está desligado da tomada de parede eléctrica.
2. Remova o cartucho anterior do aplicador, puxando cuidadosamente o cartucho para fora.
3. Elimine o cartucho anterior seguramente, em conformidade com a página 20.
4. Tire o cartucho novo do respectivo recipiente de protecção. Tente evitar tocar no vidro. Impressões digitais ou gorduras da sua pele interferem com a luz que passa através do vidro, o que reduzirá o sucesso do tratamento.
5. Faça deslizar o cartucho novo cuidadosamente para dentro do aplicador, até sentir um estalido ao encaixar.
6. Antes de ligar o sistema mē, coloque o aplicador no suporte da unidade base.

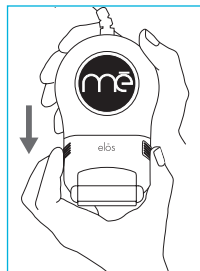

Substituir o acessório para barbear, acessório para depilar ou adaptador facial do sistema:


1. Certifique-se de que o sistema mē está desligado e de que o cabo está desligado da tomada de parede eléctrica.
2. Remova a tampa de protecção do aplicador, puxando-a cuidadosamente para fora.
3. Tire o acessório para barbear, o acessório para depilar ou o adaptador facial do respectivo recipiente de protecção. Faça-o deslizar cuidadosamente para dentro do aplicador, até sentir um estalido ao encaixar.
4. Antes de ligar o sistema mē, coloque o aplicador no suporte da unidade base.
5. Ligue o sistema mē. O sistema mē está pronto a ser utilizado.

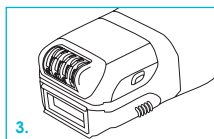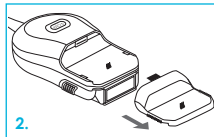

Eliminação do cartucho

- a) Se não tiver um cartucho novo, certifique-se de que coloca a tampa de protecção no sítio do cartucho usado, para proteger os componentes interiores do sistema.
- b) Siga os seus regulamentos locais para a eliminação de sistemas eléctricos ao reciclar ou eliminar a unidade base, a peça de mão ou o cartucho descartável.

Explicação da REEE

 Esta marcação indica que o produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para impedir possíveis danos ambientais ou à saúde humana resultantes de uma eliminação não controlada dos resíduos, este produto deverá ser reciclado de forma responsável de modo a promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para fazer a devolução do seu dispositivo usado, queira por favor utilizar os sistemas de devolução e recolha ou contactar a loja onde adquiriu o produto. A loja poderá entregar este produto para que seja reciclado de forma segura em termos ambientais.

Viajar com o sistema mē

O sistema mē foi concebido para tensão universal. Isso significa que pode utilizar o sistema em todo o mundo. Precisa de utilizar um adaptador para a ficha, dado que as tomadas de parede eléctricas variam consoante o país. Certifique-se de que o sistema mē não fica molhado durante a viagem.

Não o utilize em ambientes húmidos.

Resolução de problemas

Indicador	O que significa?	Como reagir
Painel de controlo		
Nenhuma luz acesa.	Cabo de alimentação não ligado.	Ligue o cabo de alimentação.
Todas as luzes do nível de energia elôs intermitentes.	Não foi seleccionado nenhum nível de energia elôs.	Seleccione um nível elôs. A ventoinha do aplicador começa a funcionar indicando que o cartucho está activo.
O botão de activação do elôs está intermitente.	Foi seleccionado um nível de energia elôs. O botão de activação do elôs fica intermitente para indicar que tem de ser premido.	Prima o botão de activação do cartucho. A ventoinha do aplicador começa a funcionar indicando que o cartucho elôs está activo.
A luz de alimentação está intermitente a cor-de-laranja.	Foi detectado um erro.	Repor: 1. Desligue o cabo de alimentação. 2. Espere até as luzes apagarem (até 2 minutos). 3. Ligue novamente o cabo de alimentação e active o sistema. 4. Passe para uma área mais fresca com uma temperatura ambiente inferior a 39 °C (86 °F) e reinicie o sistema.
Não está nenhuma luz intermitente na janela de tratamento do cartucho.	1. As barras de contacto com a pele de RF não estão em contacto com a pele na área de tratamento. 2. O botão de activação do cartucho não foi premido.	Para que o sistema emita impulsos, certifique-se de que cumpre as 3 condições: As barras de contacto com a pele de RF estão em contacto com a pele, o botão de activação do cartucho está activo e o nível elôs foi seleccionado.

Aplicador		
O botão de energia elõs na base está intermitente.	Ranhura do cartucho vazia.	Insira a tampa de protecção do cartucho ou o cartucho.
O botão de activação do acessório na base está intermitente.	Ranhura do acessório vazia.	Insira o adaptador para rosto ou o acessório (depiladora/máquina de barbear) ou a tampa de protecção.
Indicador de nível do cartucho intermitente	A quantidade de impulsos restante no cartucho elõs é reduzida.	Prepare um cartucho novo para utilizar.
Indicador de nível do cartucho aceso sem piscar.	Não restam mais impulsos no cartucho elõs.	Insira um cartucho elõs novo.
Outro		
A minha pele apresenta rubor após o tratamento	A pele pode apresentar rubor como resultado do tratamento. Este rubor desaparece geralmente dentro de 24 horas.	Se o rubor persistir durante mais de 24 horas após um tratamento, pare de utilizar o mē e contacte o seu médico ou o Atendimento ao Cliente.
Não noto quase nenhuma redução de pilosidade	Certifique-se de que segue o protocolo sugerido e de que cumpre o período de duração do tratamento sugerido.	Os resultados efectivos variam de pessoa para pessoa, consoante a área do corpo a ser tratada e o seguimento correcto das instruções. Contacte o Atendimento ao Cliente para obter assistência.
Sinto alguma dor e calor quando aplico as emissões luz intermitentes. Isto é normal?	Pode sentir calor, formiguento ou prurido. É expectável que essa dor e esse calor sejam até um nível moderado.	Se a dor for grave/intensa ou persistir durante mais de 24 horas após um tratamento, pare de utilizar o mē e contacte o seu médico ou o Atendimento ao Cliente.

Garantia e assistência

A HoMedics Inc. garante este produto contra defeitos de material ou de fabrico por um período de 2 anos a partir da data da compra, com as seguintes excepções:

A presente garantia de produto HoMedics não abrange quaisquer danos provocados por utilização incorrecta ou indevida; acidente; afixação de qualquer acessório não autorizado, alteração do produto ou quaisquer outras condições que estejam fora do controlo da HoMedics. Esta garantia só produz efeitos se o produto for adquirido e utilizado no Reino Unido / UE. Um produto que necessite de modificação ou adaptação para funcionar em qualquer país que não o país para que foi concebido, fabricado, aprovado e / ou autorizado, ou a reparação de produtos danificados devido a tais modificações não estão abrangidos por esta garantia. A HoMedics não será responsável por qualquer tipo de danos incidentais, consequenciais ou especiais.

Para beneficiar do serviço de garantia do seu produto, queira enviá-lo com portes pagos ao seu centro de assistência local, juntamente com o talão de compra com a data (como comprovativo de compra). Consulte o folheto informativo "Centro de Assistência HoMedics" para detalhes sobre o seu centro de assistência local. Uma vez recebido o produto, a HoMedics procederá à sua reparação ou substituição, consoante o caso, e devolver-lho-á com os portes pagos. A garantia só é válida através do Centro de Assistência HoMedics. A assistência a este produto por outra entidade que não o Centro de Assistência HoMedics anulará a garantia.

A presente garantia não afecta os direitos estatutários.

Contacto do atendimento ao cliente:

SCYSE

Aribau 230-240 7H

08006 Barcelona

SPAIN

saf@scyse.com

+34932379068

Informações sobre o fabricante

O mē foi fabricado pela Syneron Medical Ltd. e é distribuído no Reino Unido e na Irlanda pela HoMedics Group Ltd. A Syneron Medical Ltd. reserva-se o direito de efectuar alterações aos seus produtos ou especificações sem aviso prévio, no intuito de melhorar o desempenho, a fiabilidade ou a capacidade de fabrico. Acredita-se que as informações fornecidas pela Syneron Medical Ltd. e pela HoMedics Group Ltd. são rigorosas e fiáveis. Todavia, a Syneron Medical Ltd. e a HoMedics Group Ltd. não fazem qualquer observação relativamente às mesmas e não assumem qualquer responsabilidade pela sua utilização. Não é concedida qualquer licença pela sua implicação ou de outro modo ao abrigo de qualquer patente ou direitos de patente da Syneron Medical Ltd. A Syneron Medical Ltd. tem patentes, pedidos de patentes pendentes, marcas comerciais, direitos de autor, ou outros direitos de propriedade intelectual referentes ao produto mē.

A aquisição do mē e a disponibilização deste documento não concedem qualquer licença a estas patentes, marcas comerciais, direitos de autor, ou outros direitos de propriedade intelectual, excepto conforme expressamente previsto em qualquer documento escrito oficial da Syneron Medical Ltd. Certifique-se de que lê todas as instruções antes de iniciar o tratamento!

Copyright © 2012 HoMedics Group Ltd. Todos os direitos reservados

Rótulos e Símbolos

A placa de especificações está colada na parte inferior do sistema mãe. Indica o nome e a morada do fabricante, a referência e o número de série do sistema, os requisitos eléctricos e as normas regulamentares com as quais o sistema está em conformidade.



Do Not use in wet environment



Class II equipment



Degree of protection against electric type BF applied part



WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment



CE Mark



Follow operating instructions



This device comply with Part 15 of the (FCC) Federal Communications Commission Rules



CSA Mark for USA and Canada

Grau de protecção contra a entrada de água: normal
Este dispositivo não é adequado para utilização na presença de uma mistura inflamável de anestésicos com ar, com oxigénio ou com óxido nítrico.

Especificações

Espectro de luz: 550 – 1200 nm
Sinal óptico máx.: 4J/cm²
Frequência da onda de RF: 6.78 MHz
Potência de radiofrequência máx.: 5 Watts
RF conduzida: RF 5J/cm²

Normas aplicáveis:

Normas de segurança

EN 60335:1 2002(A1:2004; A2:2009)
EN 60335-2-8
EN 60335-2-23: 2003
EN 60335-2-27: 2003
EN 60825-9
IEC 60601-1, 3.ª edição
IEC 60601-1, 2.ª edição
IEC 60601-1-1

Normas EMC

EN 61000-6-1:2007
EN 61000-6-3:2007

Potência eléctrica nominal:

100-240 V CA, 50-60 Hz

Dimensões e peso: 20,5 cm x 15 cm x 9 cm
(L x C x A); 1,17 Kg

Condições ambientais aceitáveis

Armazenamento e transporte:

Temperatura: -10°C – 55 °C
Humidade: 90% a 55 °C
Pressão: 700 – 1060 hPa

Funcionamento:

Temperatura: 10 °C – 30 °C
Humidade Relativa: até 80% a 37 °C
Altitude: até 3900 m (13 000 pés)

***Nota:** O sistema não funciona acima dos 30 °C. Se o sistema foi armazenado em condições de muita humidade, deixe-o secar durante uma hora antes de o utilizar.*

HOMEDICS®

Valide a sua garantia para o mē e receba actualizações sobre o produto e ofertas especiais em www.memyelos.com



Jan. de 2013 Todos os direitos reservados. Syneron e mē são marcas comerciais da Syneron Beauty Ltd. e podem estar registadas em certas jurisdições. Publicação n.º 0113, REV. 01